


## Elija cómo usar su botón de ayuda.

**Decida** si desea usar su botón de ayuda como pulsera o colgante.

**A continuación,** encaje el botón en la pulsera o enganche el collar en la parte superior del botón.

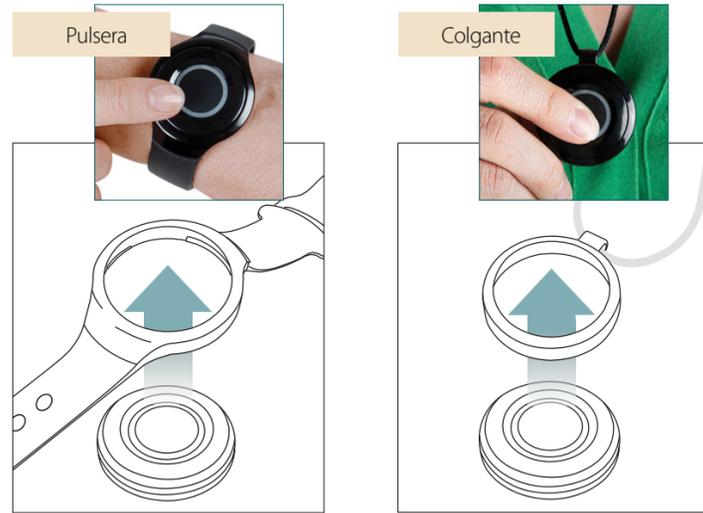

## Botón de ayuda con detección de caídas *(opcional)*



**LA DETECCIÓN DE CAÍDAS ES UN SERVICIO OPCIONAL QUE SE PUEDE PROPORCIONAR CON SU SISTEMA. LLAME AL 800.998.2400 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.**


Debe presionar el BOTÓN DE AYUDA si necesita ayuda. Si no puede presionar el botón y el botón de AYUDA detecta una caída, el sistema emite un pitido durante 15 segundos y luego envía una alerta de caída de emergencia al centro de monitoreo.

- Para CANCELAR una alerta de detección de caída falsa, presione y mantenga presionado el BOTÓN DE AYUDA durante 8 segundos.
- Para obtener mejores resultados, use EL BOTÓN DE AYUDA **POR ENCIMA** de toda la ropa.
- Maneje EL BOTÓN DE AYUDA con cuidado al colocarlo o quitárselo, ya que puede activarlo accidentalmente.


La detección de caídas no detecta el 100 % de las caídas. Si es posible, los usuarios siempre deben presionar su botón cuando necesiten ayuda.

## Conozca su consola.

Si la luz **VERDE DE ENERGÍA NO ESTÁ ENCENDIDA**, llame al Servicio de atención al cliente.

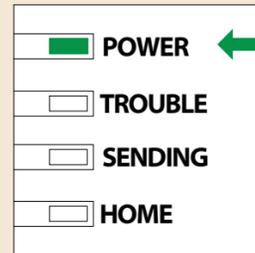

Si la luz **AMARILLA de PROBLEMAS ESTÁ ENCENDIDA**, llame al Servicio de atención al cliente.

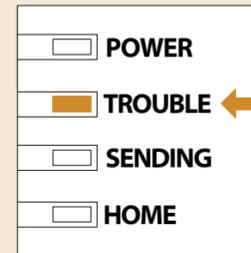

El botón de ayuda es resistente al agua y se **PUEDE** usar en la ducha.



Pulse el botón de **BORRAR (CLEAR)**, para silenciar temporalmente un anuncio de voz.



## Proteja su equipo de alerta médica.



Botón de ayuda o estación de base perdidos o fuera de lugar



Daños por polvo, calor y humedad



Caídas, derrames o accidentes



Sobrecargas eléctricas

Nuestro Plan de Aseguramiento de Alerta Médica le brinda tranquilidad adicional al saber que su equipo de alerta médica que salva vidas siempre está protegido de los percances cotidianos. ¿Perdió el botón de ayuda? ¿Los nietos derramaron un refresco sobre el equipo de alerta médica? No se preocupe, está protegido con nuestro Plan de Aseguramiento.

Llame ya al 800.998.2400 para obtener más información o para inscribirse.

### IMPORTANTE:

Firme el Acuerdo de Servicio donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.

LF 635 04/22 ©LifeStation 2022



Si tiene preguntas al configurar su sistema, llame al **(800) 998-2400** para obtener ayuda.

Si tiene preguntas al configurar su sistema, llame al **(800) 998-2400** para obtener ayuda.

Si tiene preguntas al configurar su sistema, llame al **(800) 998-2400** para obtener ayuda.

# Primeros pasos

- 1 Siga los pasos que se indican en el interior para configurar el sistema.
- 2 Revise el **Formulario de información de su cuenta** adjunto y llámenos si necesita hacer algún cambio.
- 3 Firme el **Acuerdo de servicio** donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.




Empiece aquí.

**Primero**, determine dónde colocará la consola.

La consola debe estar cerca de una **toma de corriente que no esté controlada por un interruptor** y cerca de un **teléfono** conectado a un enchufe de pared.

**A continuación**, lleve la caja con **todo el contenido** a esta ubicación. Ya puede configurar su consola.

**Ahora**, siga los pasos siguientes a la derecha para conectarse y activar su sistema de alerta médica.

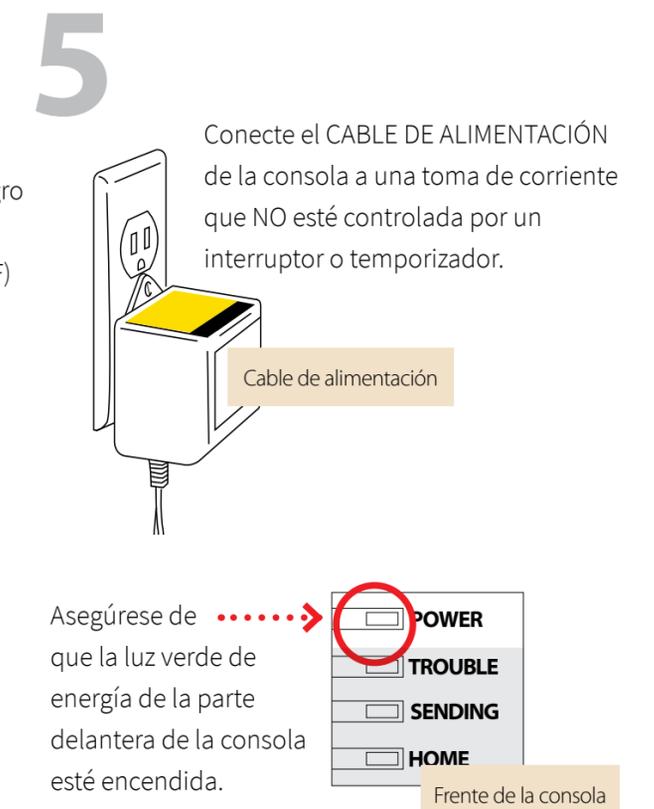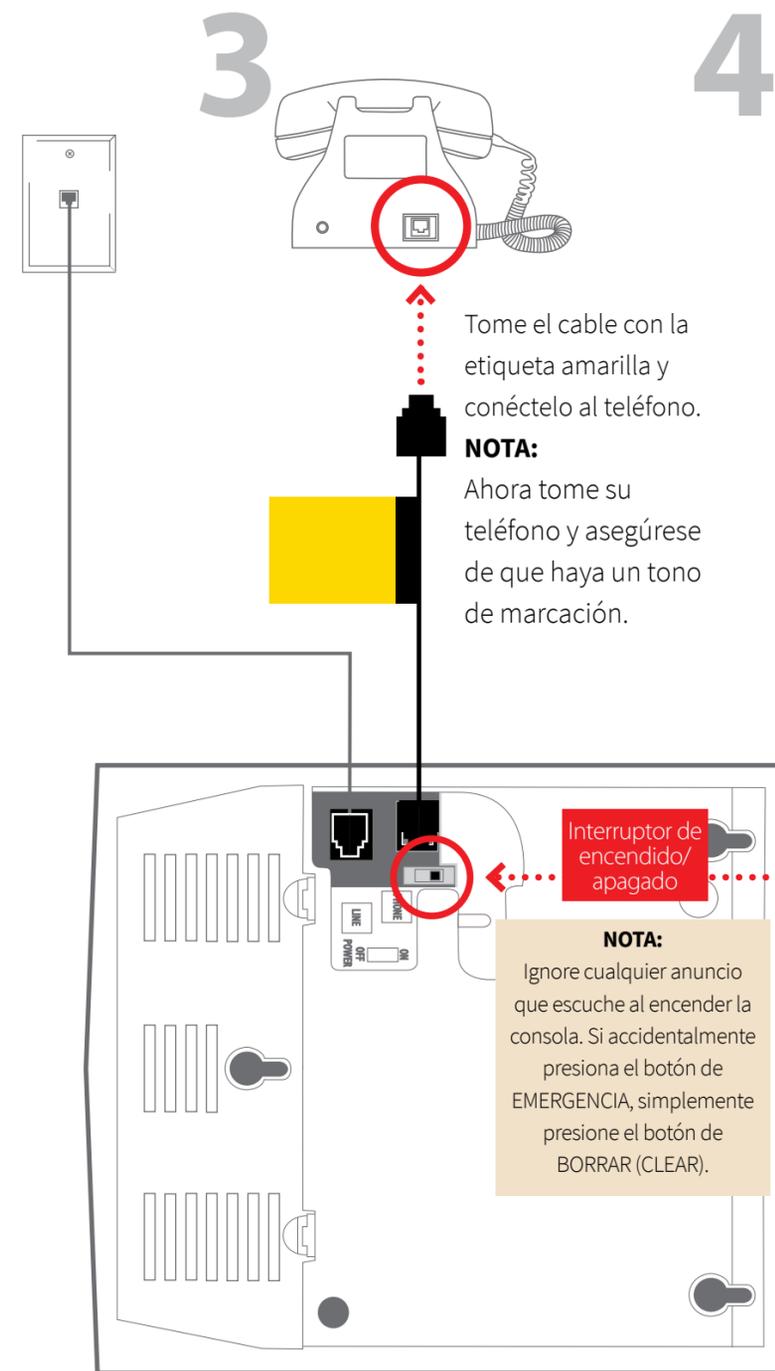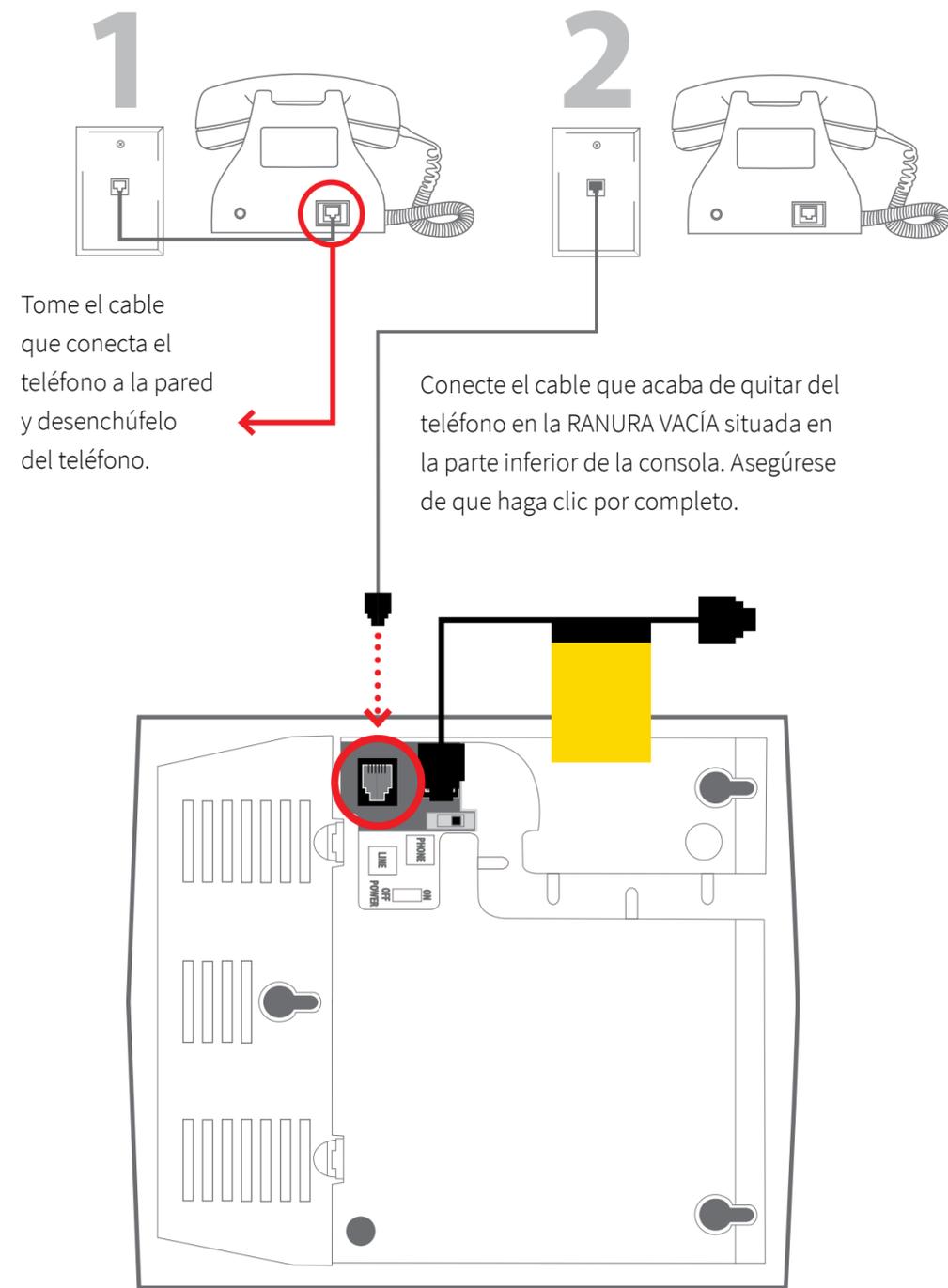

## Pruebe su sistema.

Para probar su equipo, llame al 855-908-3501 desde el teléfono de su hogar antes de presionar el botón de ayuda.



Si tiene preguntas al configurar su sistema, llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.

**IMPORTANTE:** Firme el Acuerdo de servicio donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.