


# PEARL

Guía de configuración

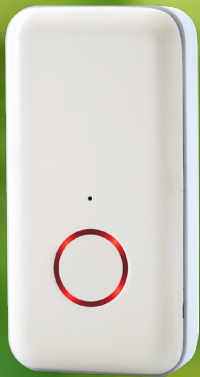

**LifeStation**  
SISTEMAS DE ALERTA MÉDICA

## Tabla de Contenidos

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ¿Qué hay en la caja? .....      | 4  |
| Conoce tu Pearl .....           | 6  |
| Preguntas frecuentes .....      | 9  |
| Configuración de tu Pearl ..... | 10 |
| En caso de emergencia .....     | 12 |
| Cómo llevar tu Pearl .....      | 13 |
| Cómo ajustar tu cordón .....    | 14 |

## ¿Qué hay en la caja?

---



**Pearl**





**Cargador**



**Acollador**



**Clip para cinturón**  
(Opcional)

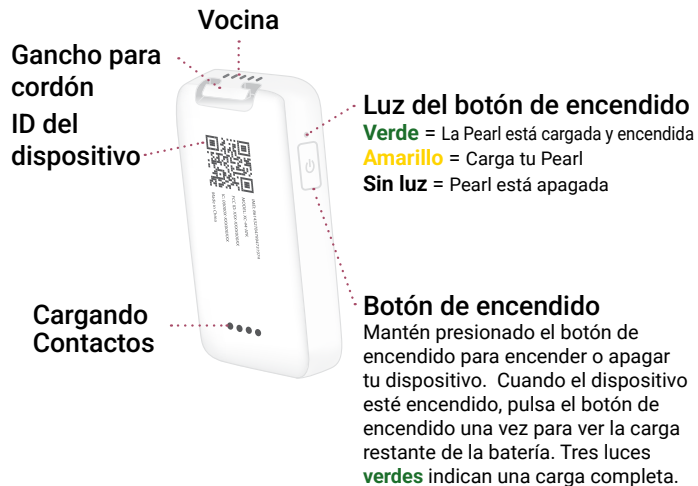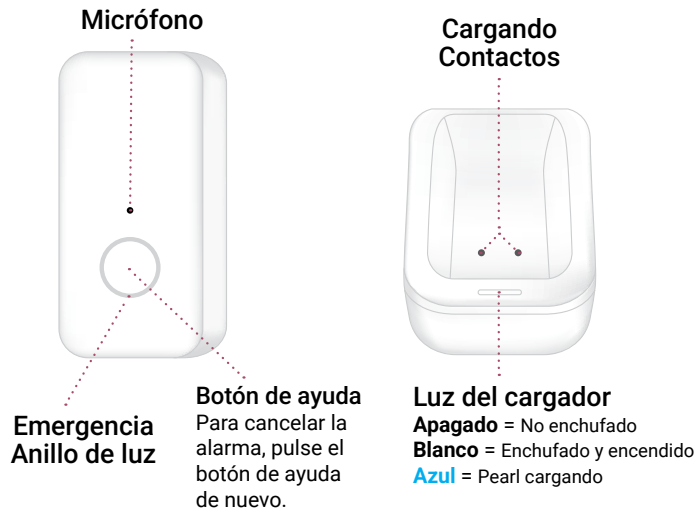

## Conoce tu **Pearl**

### Comprobación del nivel de batería:

Presiona el botón de encendido en el lado derecho de tu Pearl.

Las luces verdes indicarán el nivel de batería restante de tu dispositivo.



**1 luz verde**

**CARGA  
INMEDIATAMENTE**



**2 luces verdes**

**PARCIALMENTE  
CARGADO**



**3 luces verdes**

**COMPLETAMENTE  
CARGADO**

## Preguntas frecuentes

### 1. ¿Con qué frecuencia debo cargar mi Pearl?

Para obtener mejores resultados, debes cargar completamente tu Pearl diariamente.



**Carga diaria**

### 2. ¿Mi Pearl es resistente al agua?

Tu Pearl es resistente al agua según la norma IP67 y se puede usar en la ducha, pero no debe sumergirse en agua.



**Resistente  
al agua**



**No sumergir**

### 3. ¿Dónde funciona mi Pearl?

Tu Pearl funcionará tanto dentro como fuera de tu casa, siempre que haya cobertura celular.



**En la casa**



**Fuera de  
casa**

### 4. ¿Con qué frecuencia debo probar mi Pearl?

Debes probar tu Pearl mensualmente. Para probar tu Pearl, presiona y mantén presionado el botón de ayuda hasta que escuches el mensaje de alerta de emergencia. Cuando estés conectado al Centro de Monitoreo, indica que solo estás probando tu Pearl.



**Prueba  
mensualmente**

# Configuración de tu Pearl

## 1. Conecta el cargador.

La luz del cargador se volverá blanca.

## 2. Coloca tu Pearl en el cargador como se muestra.

Cuando la carga se realice correctamente, la luz del cargador se volverá **azul** y tu Pearl anunciará "Cargando".

Las luces de estado de la batería se volverán **verdes** mientras se está cargando. Tu Pearl estará completamente cargada cuando las tres luces **verdes** estén visibles. Tu Pearl puede tardar hasta cuatro horas en cargarse por completo.

## 3. Prueba tu Pearl presionando y manteniendo presionado el botón de ayuda hasta que escuches el mensaje de alerta de emergencia. Cuando estés conectado al Centro de Monitoreo, indica que solo estás probando tu dispositivo.



Cargador enchufado



Carga de Pearl



Pearl completamente cargada

## Para encender tu Pearl:

Coloca tu Pearl en el cargador o mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. Cuando tu Pearl se encienda, sentirás una vibración y escucharás "Encendiendo".

## Para apagar tu Pearl:

Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. Tu Pearl vibrará, la luz de encendido parpadeará y luego se apagará.

***Asegúrate de apagar tu Pearl antes de devolverlo.***

## En caso de emergencia

**Si necesitas ayuda, mantén presionado el botón de ayuda hasta que escuches el mensaje de alerta de emergencia.**

Se le conectará con un especialista en atención que estará disponible para ayudarte.

Tu Pearl funcionará en interiores o exteriores, dondequiera que haya cobertura celular.

### Cómo cancelar una activación accidental

Para cancelar una alarma, presiona el botón de Ayuda nuevamente.

Si estás conectado y el Centro de Monitoreo te pregunta si necesitas ayuda, di claramente "No". Se te pedirá que confirme que no necesita ayuda.



### Detección de caídas (opcional)

En los dispositivos con detección de caídas habilitada, si se detecta una caída y no se puede presionar el botón de ayuda, el dispositivo envía una alerta de emergencia a un especialista en atención médica.

Para obtener mejores resultados, usa tu Pearl en el cordón y fuera de toda tu ropa.

*La detección de caídas no detecta el 100 % de las caídas. Si es posible, los usuarios siempre deben presionar su botón cuando necesiten ayuda.*

## Cómo llevar tu Pearl

### Lleva tu Pearl como collar

Tu Pearl vendrá lista para usar con el cordón adjunto. Si quitas el cordón, puedes volver a colocarlo fácilmente pasándolo alrededor del gancho ubicado en la parte superior de tu Pearl. El cordón es ajustable para su comodidad y tiene un cierre de seguridad.



Ten en cuenta que si tienes detección de caídas, recomendamos que uses tu Pearl alrededor del cuello.

# Cómo ajustar tu cordón

## 1. Ajuste de la longitud

Tu cordón puede hacerse más corto o más largo. Se puede ajustar entre 17 pulgadas y 34 pulgadas para adaptarse cómodamente.



## 2. Para hacerlo más apretado

Sujeta el lazo de sujeción con los dedos y tira suavemente hacia afuera de la tapa del extremo. Esto hará que el cordón sea más corto y ayudará a que quede ajustado cómodamente alrededor de tu cuello.

## 3. Para hacerlo más suelto

Sujeta el lazo de sujeción y muévelo lentamente hacia la tapa del extremo.

Esto hará que el cordón sea más largo y permitirá más espacio alrededor de tu cuello. Una vez que hayas alcanzado la longitud deseada, tira de la tapa del extremo para asegurar el ajuste.

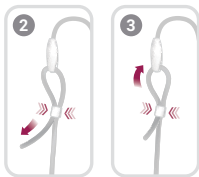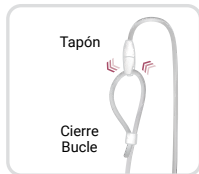

## Uso del clip de cinturón opcional

- Si tu paquete incluía el clip para cinturón adicional, sostén el clip para cinturón en una mano y el dispositivo en la otra. Coloca tu Pearl en el clip y presiónala en su lugar hasta que sientas que hace clic.



¡Gracias por unirte a la familia  
LifeStation!

**LifeStation®**  
SISTEMAS DE ALERTA MÉDICA

Atención al cliente  
**800-998-2400**



Escanea aquí para ver esta guía en  
un formato más grande o para leerla  
en español, mandarín, ruso y más.

Este dispositivo depende de la cobertura celular para funcionar.  
Cuando la cobertura celular es limitada, es posible que el dispositivo tenga capacidades reducidas.