


PEARL

设置指南

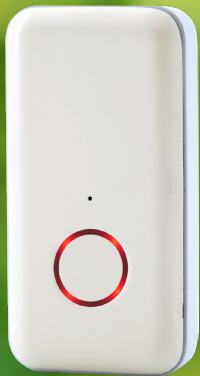

LifeStation
MEDICAL ALERT SYSTEMS

盒子里装的是什么？




Pearl



充电器




挂绳

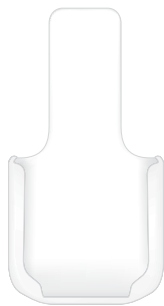

皮带夹
(可选)

了解你的 Pearl

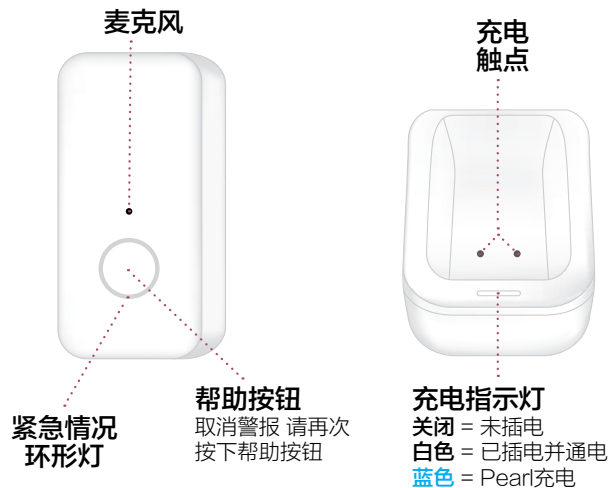

了解你的 Pearl

检查电池电量：

按下您的Pearl 右侧的电源按钮。

绿灯会显示您设备的剩余电量。



1绿色的灯
立即充电



2 绿色的灯
充部分电量充电



3绿色的灯
已充满电

常见问题解答

1. 我的 Pearl 应该多久充电一次？

为了获得最佳效果，您应该每天将 Pearl 充满电。



每日充电

2. 我的Pearl 手机防水吗？

您的 Pearl 具有 IP67 防水功能，并且能够淋浴时佩戴，但不应浸没在水中。



防水



请勿浸入
水中

3. 我的Pearl在哪里工作？

只要有蜂窝覆盖范围，您的 Pearl 可在室内和室外使用。



室内



室外

4. 我应该多久测试一次我的Pearl？

你应该每月测试一次你的 Pearl。要测试您的 Pearl，请按住“帮助”按钮，直到听到紧急警示信息。当您被连接到监控中心后，请表明您只是在测试您的 Pearl。



每月测试

设置您的 Pearl

1. 插入充电器。

充电指示灯将变为白色。

2. 如图所示，将您的 Pearl 放在充电器上。 充电正常时，充电指示灯会亮起呈蓝色您的 Pearl 会发出“正在充电”的提示音。

当充电时. 电池状态灯将变为绿色。当所有三个绿灯都可见时，你的 Pearl 就充满电了。您的 Pearl 充满电可能需要长达四个小时。

3. 通过按住帮助按钮直到听到紧急警报信息来测试您的 Pearl。当您被连接到监控中心后，请表明您只是在测试您的设备。



充电器已插入



Pearl在充电



Pearl已充满电

开启您的 Pearl 设备：

将您的 Pearl 放入充电器中，或按住电源按钮三秒钟。当您的 Pearl 开机时，您会感觉到振动，并听到“正在开机”的提示音。

关闭您的 Pearl 设备：

按住电源按钮三秒钟。您的 Pearl 将会震动，电源指示灯会闪烁，然后熄灭。**归还 Pearl 前，请务必将其关闭。**

在紧急情况下

如果您需要帮助，请按住求助按钮，
直到听到紧急警报信息。

.....
您将被链接到一位护理专员，他/她将随时为您提供帮助。
无论室内室外，只要有手机信号覆盖，您的 Pearl 手机都能正常使用。

如何取消意外激活

要取消警报，请再次按下帮助按钮。

如果您已连接，并且监控中心询问您是否需要帮助，
请清晰地回答“不需要”。您将被要求确认不需要帮助。



Fall (跌倒)检测 (可选)

对于启用Fall (跌倒)检测功能的设备，如果检测到Fall (跌倒)且您无法按下求助按钮，设备会将紧急跌倒警报发送给护理专员。

为了获得最佳效果，将您的Pearl佩戴在挂绳上并戴在所有衣服的外面。

Fall (跌倒)检测不能检测到100%的跌倒。如果可以，
用户在需要帮助时应总是按下他们的按钮。

如何佩戴你的 Pearl

把您的Pearl当作项链佩戴

你们的Pearl配有挂绳，可直接佩戴。如果你把挂绳取下来，可以很容易地通过绕圈重新系上将它绕在您的Pearl 顶部的挂钩上。
挂绳可调节，以提供舒适体验，并配有安全脱扣。



请注意，如果您有 Fall (跌倒) 检测功能，我们建议您将 Pearl 戴在脖子上。

如何调整挂绳

1. 调整长度

您的挂绳可以改短或改长。可以调节它的尺寸，范围在 17 英寸到 34 英寸之间，以适应您的舒适度。


2. 为了使其更紧

用手指捏住固定环，轻轻地从端盖上拉开。这样可以缩短挂绳的长度，使其更贴合你的脖子。

3. 使其更宽松

握住固定环，慢慢地将其移向端盖。

这样可以加长挂绳，让脖子周围有更大的活动空间。一旦达到所需长度后，拉紧端盖以固定。

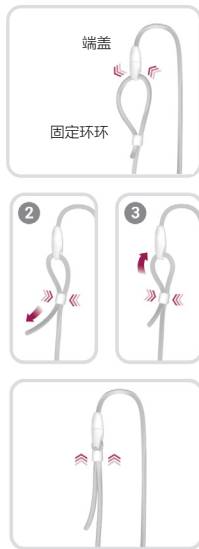

使用可选的皮带夹

如果您的包装中包含腰夹附件，请一手握住腰夹，且另一手握住设备。将您的Pearl放入夹子中并将其推入到位，直至感觉到咔嗒一声。



感谢您加入
LifeStation家庭！

LifeStation®
MEDICAL ALERT SYSTEMS

客户服务800-998-2400



扫描此处以查看大图或阅读西班牙语、
普通话、俄语和更多语言版本。

这个设备依赖蜂窝网络覆盖才能正常工作。
在蜂窝网络覆盖有限的地区，您可能会遇到设备功能下降的情况。